




Données techniques

TV Connector

Le TV Connector est une interface TV et audio dédiée pour les aides auditives sans fil Phonak Audéo B-Direct, qui offre une expérience d'écoute exceptionnelle. La transmission à faible latence du son du téléviseur aux aides auditives offre une excellente qualité sonore stéréo. Le TV Connector, simple d'utilisation, transforme les aides auditives Phonak Audéo B-Direct en oreillettes légères sans fil.

Description

1. Bouton de connexion
2. Témoin lumineux (LED)
3. Prise micro USB
4. Prise audio pour :
 - Toslink (optique)
 - Jack 3,5 mm

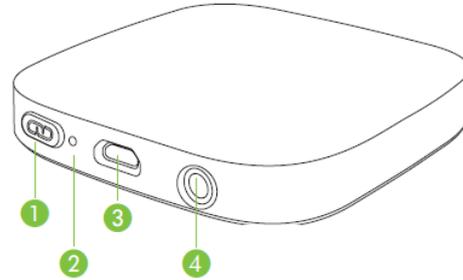

Accessoires fournis :

- Alimentation électrique avec câble USB
- Câble audio Toslink
- Câble jack audio 3,5 mm
- Kit Velcro

Fonctions spécifiques

- Compatible avec les aides auditives Phonak Audéo B-Direct
- Connecte plusieurs utilisateurs d'aides auditives Phonak Audéo B-Direct simultanément
- Jusqu'à 15 mètres de portée de transmission
- Prise en charge des signaux audio numériques
- Option de génération de test de sons
- Aucune vue directe avec les aides auditives nécessaire
- Ensemble complet avec fiche secteur, alimentation, câble audio et bande Velcro

Informations générales

| | |
|--|--|
| Dimensions (L x l x H) : | 63 x 63 x 12 mm |
| Poids : | 30 g |
| Couleur : | noir |
| Conditions de fonctionnement : | 0 °C à 40 °C. Humidité relative <90 % (sans condensation) |
| Conditions de transport et de stockage : | -20 °C à 60 °C. Humidité relative de <90 % pendant une période prolongée |

Témoin lumineux

| | |
|---|---|
| Veille (en marche, aucune entrée audio) : |  Rouge continu |
| Diffusion (entrée audio valide) : |  Vert continu |
| Mode de connexion : |  Clignotement bleu |
| Aucune entrée audio valide (DTS ou Dolby) : |  Clignotement rouge |
| Erreur de démarrage : |  Clignotement rapide rouge |

Alimentation électrique

| | |
|------------------------------|---|
| Type : | CC, stabilisé |
| Tension secondaire : | 5 VCC |
| Courant max. : | 500 mA |
| Connecteur : | micro USB |
| Remarque importante : | Utilisez uniquement l'alimentation Phonak d'origine ou une alimentation USB certifiée 5 VCC, > 500 mA |

Informations audio

| | |
|-----------------|---|
| Entrées audio : | <ul style="list-style-type: none">Analogique (prise 3,5 mm)Optique numérique (Toslink) |
| Qualité audio : | Stéréo, 120 Hz – 7,3 kHz |

Informations radio

| | |
|--|-----------------------|
| Technologie de diffusion : | Technologie AirStream |
| Bande passante : | Bande ISM 2,4 GHz |
| Puissance RF : | 100 mW max. |
| Portée émetteur: | Jusqu'à 15 m |
| Nombre maximum d'appareils couplés simultanément : | Illimité |

Normes

| | |
|-------------------|--|
| Europe | EN 300 328 EN 301 489 CEI/EN 60601-1-2 EN 60950-1 CEI/EN 62479 |
| Canada | RSS-247 RSS-102 |
| Japon | ARIB-T66 |
| États-Unis | CFR 47, part 15,247 FCC OET Bulletin No.65 |


Information sur la compatibilité

Le TV Connector n'est compatible qu'avec les aides auditives Phonak Audéo B-Direct.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet :
www.phonakpro.fr/TVconnector


Informations sur la connexion en un clic

Après avoir installé le TV Connector, veuillez suivre les étapes suivantes pour connecter les nouvelles aides auditives compatibles, si nécessaire.


- 1) Appuyez sur le bouton de connexion à l'arrière.

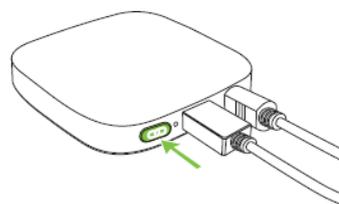

- 2) Assurez-vous que les aides auditives sont allumées et se trouvent à 1 mètre max. du TV Connector.

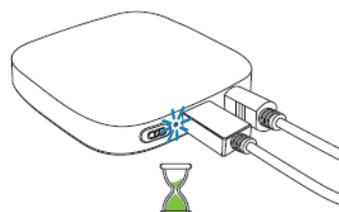

- 3) Vous entendrez un bip de confirmation dans vos aides auditives, vous indiquant que la connexion est établie.

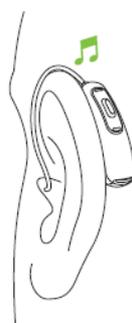

Aucune autre manipulation n'est nécessaire.