



ITC R OMEGA AI

Intra-conduit Rechargeable



ITC R OMEGA AI 24 (PREMIUM+)


ITC R OMEGA AI 20 (PREMIUM)

ITC R OMEGA AI 16 (AVANCÉE)

DESCRIPTION

Intra-conduit connecté rechargeable, discret et confortable. Réalisé sur-mesure, cet intra-auriculaire se loge dans le conduit auditif. Il peut être adapté pour les pertes auditives allant de moyennes à sévères. Technologie sans-fil 2,4 GHz basée sur la plateforme Neuro Processeur Starkey G3, avec une optimisation des fonctions directionnelles et spatiales pilotées par le DNN ; suivi de santé enrichi et expérience utilisateur améliorée grâce à l'IA générative.

Coque

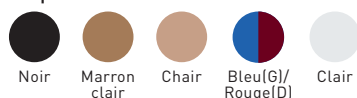

Plaque



LPP Classe II



Rechargeable
Lithium-ion



Connectivité
universelle



Capteurs
inertiels



Réglages
à distance



Bluetooth®
LE Audio
Auracast™



Intelligence
artificielle
avancée



Assistant
intelligent
(IA)



Optimisation
du signal vocal
en temps réel



Communications
mains libres



Surveillance
santé individuelle



Gestion des
acouphènes

APPLICATIONS INTELLIGENTES



My Starkey
pour les utilisateurs



HearShare
pour les aidants

Cette application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à surveiller votre santé et accéder à des informations utiles.

Vous partagez des informations telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions avec les personnes de votre choix.

IMPORTANT : Ces applications permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. Nous vous conseillons donc de vérifier la compatibilité de votre smartphone sur notre site internet www.starkey.fr, ou en flashant ce QR Code.



Performances	GAMME TECHNOLOGIQUE	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	AVANTAGES
Technologie Neuro Processeur G3	Canaux de réglages Bandes de compression	24/24	20/20	16/16	Niveau technologique très hautement performant. Doté de 24 canaux et 24 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une résolution sonore haute définition. Offre d'excellentes performances et une souplesse de transition optimum dans toutes sortes d'environnements sonores y compris les plus bruyants et complexes.
	Autonomie de la batterie streaming : sans/avec	42 heures 36 heures	42 heures 36 heures	42 heures 36 heures	L'autonomie peut varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans-fil. Fonctionne avec les chargeurs StarLink 2.0 avec batterie intégrée (Premium) ou sans batterie intégrée.
	Indice de protection NOUVEAU	IP68+	IP68+	IP68+	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. En plus de l'IP68, l'aide auditive est dotée de la nouvelle technologie Pro10 HydraShield, qui la rend résistante aux défis du quotidien et étanche jusqu'à 1 mètre pour une durabilité renforcée.
Options	Contrôle utilisateur	●	●	●	Peut-être équipé d'un bouton-poussoir multifonction permettant de régler le volume et de changer les programmes.
Performances auditives	Luminosité des consonnes	●●●●	●	●	Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la parole.
Technologie Neuro Sound 2.0	Voice AI	●			Votre iPhone est utilisé comme microphone à distance et grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, vous bénéficiez d'une amélioration du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans le bruit.
	Mode Edge+ Optimisation du signal vocal en temps réel	●●●● Adaptatif Personnalisation App	●● Personnalisation App	● App	Avec le Mode Edge+ qui agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle.
	Streaming direct audio via le Bluetooth®	●	●	●	Vous pouvez recevoir des appels, écouter de la musique dans vos aides auditives avec votre smartphone, tablette et autres appareils audio ; et profiter de vos programmes TV préférés grâce à un accessoire sans-fil.
	Audio bidirectionnel Communications mains libres	●	●	●	Les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers votre smartphone, vous permettant de converser simplement en mains libres. Possibilité de répondre/refuser un appel.
	Adaptatif	●●●●	●●	●	Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.
Directionnel Microphones directionnels (en option)	Dynamique	●	●	●	
	Traitement musique	●●●●	●●	●	Permet de redécouvrir la musique grâce à un traitement de signal dédié.
	Réducteur de bruit	●●●●	●●	●	Réduction du bruit basée sur le DNN. Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une qualité sonore maximale, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements très bruyants.
Sound Manager (Gestionnaire de sons) Algorithmes de traitement du son	Calme	●●●●	●●	●	
	Bruits mécaniques	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte de multiples environnements sonores simultanément. Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute. Vous aurez un plaisir d'écoute dans tous les environnements bruyants et complexes.
	Parole dans le bruit	●●●●	●●	●	
	Bruits transitoires	●●●●	●●	●	
	Vent	●●●●	●●	●	

Autres fonctions avancées	Tinnitus Multiflex <i>Gestion des acouphènes</i>	 Pro	 Pro		Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
	Annulateur de Larsen				Système pro-actif de gestion des Larsens qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
	Duplication fréquentielle				Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.

Fonctions télésanté et fonctions pratiques

Surveillance fréquence respiratoire		NOUVEAU Votre fréquence respiratoire au repos est mesurée automatiquement et affichée en cycles par minute, vous permettant de suivre facilement votre état de santé et de mieux comprendre votre respiration.
Exercices d'équilibre		NOUVEAU Vous améliorez votre équilibre avec des exercices adaptés, accompagnés de données sur vos mouvements pour suivre vos progrès et repérer les évolutions.
Évaluation de l'équilibre		Vous dépistez rapidement vos troubles de l'équilibre à distance grâce à des tests guidés et analysés automatiquement.
Engagement & Suivi d'activité		Suivi de l'activité physique et de l'engagement social pour atteindre des objectifs santé.
TeleHear <i>Réglages à distance</i>		Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance, sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
Détection et alertes en cas de chute		Détection d'une chute et envoi d'un message d'alerte à des contacts prédéfinis.
Auto On/Off		Préservation de l'énergie de vos aides auditives lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Double tap		Tapoter 2 fois pour activer la fonction paramétrée.
Self Check		Test diagnostique des composants de vos aides auditives.

Fonctions intelligentes

NOUVEAU IA générative, intégrée dans deux nouvelles fonctions.  TeleHear AI <i>Ajuste instantanément vos aides auditives selon des milliers de réglages professionnels.</i> Assistant intelligent Gen AI <i>Répond à vos questions vocales et fournit des infos détaillées sur vos aides auditives et d'autres sujets.</i>	
Traduction	 
Transcription audio-texte	 
Assistant intelligent	 
Rappels intelligents	 
Trouver mes aides auditives	 

Accessoires sans-fil

Connectivité avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	
Accessoires StarLink Edge <i>Microphone à distance</i> <i>Microphone de table</i> <i>Émetteur TV</i> <i>Télécommande StarLink 2.0</i>	Apple Watch <i>Montre connectée servant d'interface pour votre iPhone</i> My Starkey : Possibilité d'activer le Mode Edge+, de changer de programme et de régler le volume.
•Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat. •Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires StarLink fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.	



Apple Watch est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Les termes « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone, un iPad ou une Apple Watch peut affecter les performances sans fil. Google Play est une marque déposée de Google, LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par Starkey se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le logo Starkey, Starkey Omega, TeleHear, Edge Mode, Hear Share, StarLink, Starkey Neuro Processor, Neuro Sound Technology et Multiflex Tinnitus sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.